



CURASEPT®

MECHANICZNA HIGIENA JAMY USTNEJ

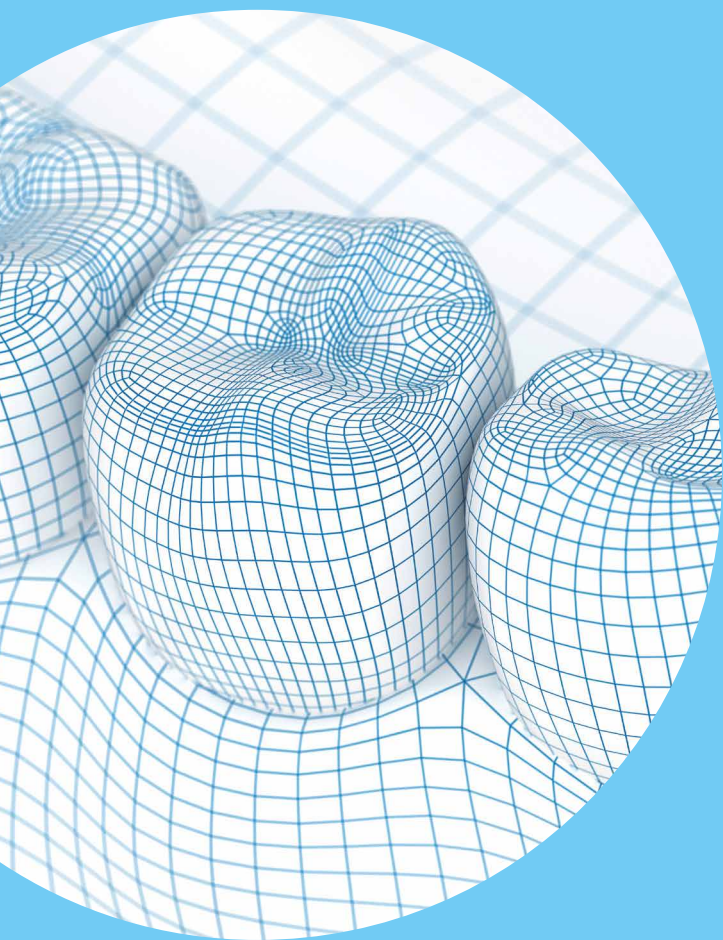

Rozwiązanie
złożonego
problemu

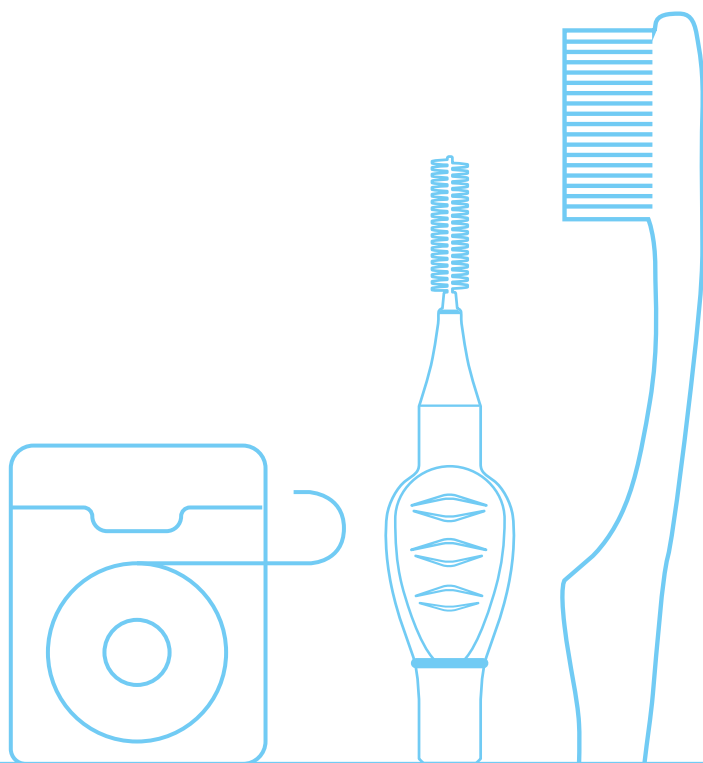



Higiena jamy ustnej

Mechaniczna higiena jamy ustnej stanowi nadal **złożony problem**, gdyż pacjent nie ma wystarczających wiadomości dotyczących środków i poprawnych sposobów czyszczenia własnych zębów.

Błędnie uważa się, że szczoteczka do zębów jest wystarczająca do całkowitej higieny jamy ustnej, nie wiedząc, że ząb ma 5 powierzchni i potrzeba więcej narzędzi do ich odpowiedniego czyszczenia.

Ta częściowa wiedza prowadzi często do niewystarczającej lub nieodpowiedniej higieny jamy ustnej, którą czasami pacjent próbuje zrekompensować przy użyciu chemicznych produktów do higieny jamy ustnej takich jak płyny do płukania, uważając je za skuteczne.

Zamieszanie to, które z pewnością wpływa na zdrowie zębów, dziąseł i jamy ustnej, może również spowodować uszkodzenie innych obszarów organizmu.

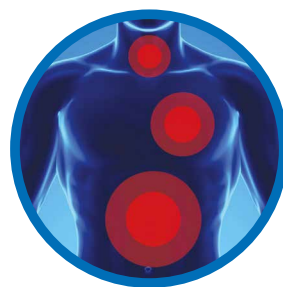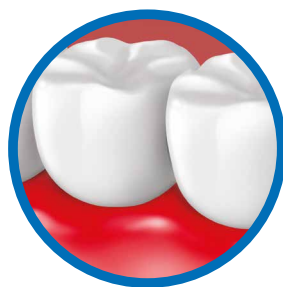


5 powierzchni zęba

Poprawna, mechaniczna higiena jamy ustnej powinna codziennie usuwać resztki pożywienia i płytkę nazębną **ZE WSZYSTKICH 5 POWIERZCHNI ZĘBA** łącznie z przestrzeniami międzyzębowymi i brzegami dziąseł.

W tym celu konieczne jest posłużenie się kilkoma narzędziami, z których każdy jest odpowiedni dla danej części zęba.

5

Powierzchnia międzyzębowa dystalna

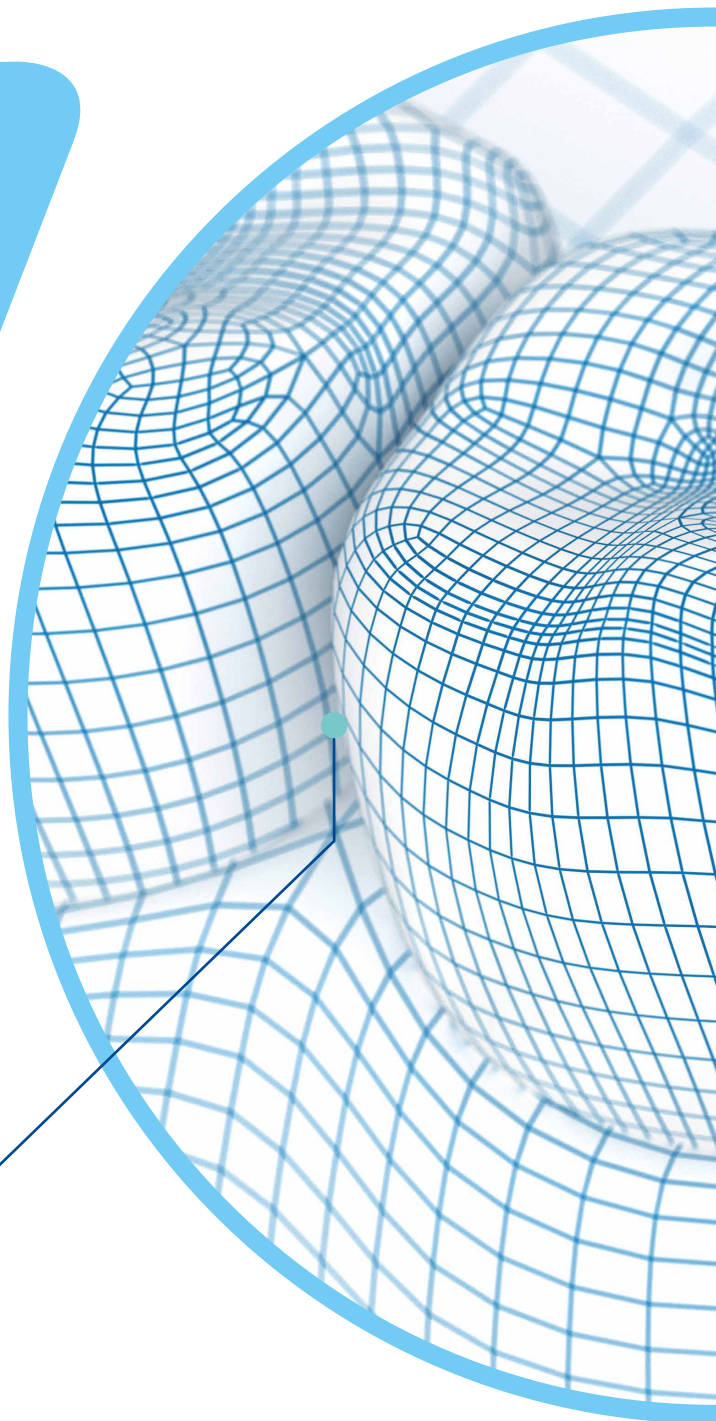

4

Nici dentystyczne



Skutecznie oczyszczają obszary w pobliżu punktów kontaktowych, bruzdy dziąsłowe i wąskie miejsca, gdzie nie można wprowadzić szczoteczki międzyzębowej.

1 Powierzchnia żująca

2 Powierzchnia
językowo/
podniebienna

1 2 3

Szczoteczka

Skutecznie czyści
3 powierzchnie zęba:

- żującą
- językowo/podniebienną
- przedsionkową



3 Powierzchnia
przedsionkowa

4 5

Wykałaczka

Usuwa resztki jedzenia
obecne w przestrzeniach
międzyzębowych.



4 Powierzchnia międzyzębowa mezialna

4 5


Szczoteczka międzyzębowa

Skutecznie usuwa płytkę
nazębną z przestrzeni
i powierzchni
międzyzębowych.



Szczoteczka

Szczoteczka jest narzędziem do czyszczenia 3 powierzchni zęba:

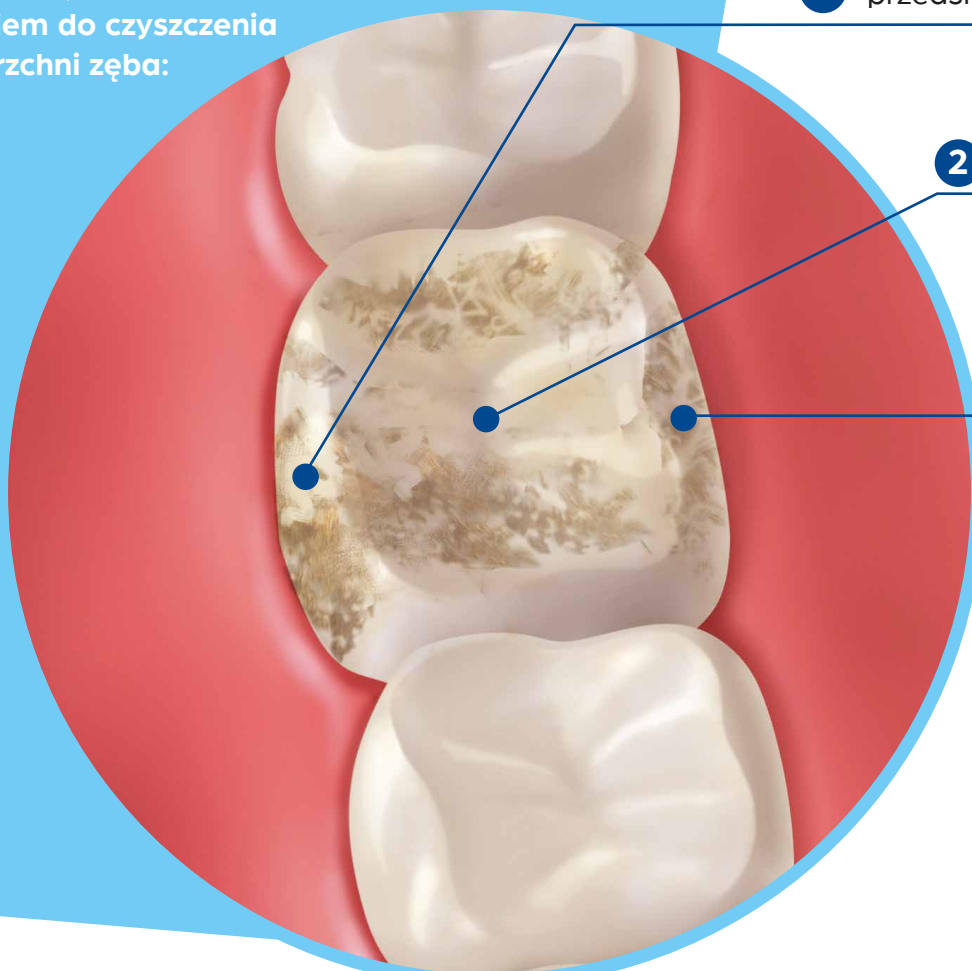

1 Powierzchnia przedśionkowa

2 Powierzchnia żująca

3 Powierzchnia językowo/
podniebienna


Łamigłówka: jaką główkę wybrać??

Istnieje wiele rodzajów szczoteczek do zębów, których główna różnica polega na kształcie główki i włosiu.


Dla jamy ustnej, bez problemów, preferowana jest szczoteczka do zębów z **MAŁĄ GŁÓWKĄ**, ponieważ zachowuje większą zwrotność i **dostosowuje włosie do każdego zęba maksymalizując efekt czyszczenia**. Dodatkowo kompaktowa główka pozwala na bardziej precyzyjne i szczegółowe szczotkowanie zęba po zębie.

W przypadkach, w których występują problemy z dziąsłami, można użyć szczoteczki z **WIEKSZĄ GŁÓWKĄ** z bardzo miękkim włosiem, będącą w stanie **rozprowadzić siłę wywieraną** przez szczotkowanie **na szerszą powierzchnię**, uzyskując mniejszy nacisk na dziąsła.

MAŁA GŁÓWKĄ

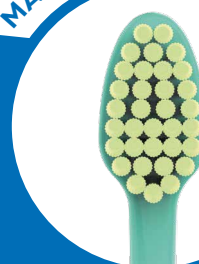

WIEKSZA GŁÓWKĄ

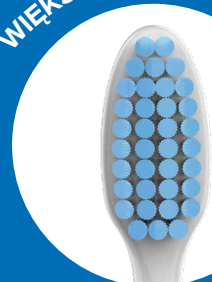

Włosie: znaczenie gęstości

Zwykle istnieją 3 różne stopnie twardości: miękkie, średnie, twarde.

W zależności od twardości włosa należy dostosować technikę i intensywność szczotkowania. Twarde lub średnie włosie powinno być używane tylko przez tych, którzy mają doskonałą kontrolę nad techniką szczotkowania, ponieważ im włosie jest twardsze, tym bardziej może uszkodzić dziąsła i zęby.

BŁĘDNE jest twierdzenie, że miękkie włosie ma mniejszą skuteczność czyszczenia. Skuteczność szczoteczki do zębów jest rzeczywiście związana z ilością i z gęstością włosa oraz z możliwościami dostosowania się włosa do budowy zęba przy szczotkowaniu.

Szczoteczka z twardym włosiem posiada zwykle mało włosa przez co stwarza to, co można określić jako „efekt grabienia”, czyli usunięcie z grubsza płytki nazębnej przy nierównomiernym oddziaływaniu włosa szczoteczki na powierzchnię zęba. Oznacza to konieczność szczotkowania kilka razy w tym samym punkcie z ryzykiem uszkodzenia dziąseł i tworzenia stanu zapalnego.

Szczoteczka do zębów o dużej liczbie miękkich włosków działa na zęby i dziąsła w sposób równomierny i delikatny, skutecznie i gruntownie usuwając płytkę nazębną na całej powierzchni.

Specjalistyczne szczoteczki do zębów

Istnieją specjalistyczne szczoteczki wskazane do higieny jamy ustnej przy występowaniu określonych problemów.



Jednopęczkowa

W przypadku szczególnie dużych przestrzeni międzyzębowych, dla osób noszących aparaty ortodontyczne, z implantami lub mostami, krzywo ustawionych zębach, powierzchni o głębokiej erozji.




Implant

W przypadku implantów i stałych protez.



Pozabiegowe

Higiena jamy ustnej w ciągu pierwszych kilku dni po operacji, w przypadku uszkodzeń dziąseł, w czasie i po radioterapii

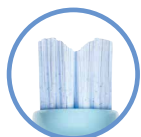


Ortodontyczne

Dla stałych aparatów ortodontycznych.




Szczoteczka międzyzębowa

Szczoteczka międzyzębowa umożliwia optymalne czyszczenie w przestrzeniach międzyzębowych, gdzie zwykła szczoteczka nie ma dostępu, a nić dentystyczna i wykałaczką nie mogą optymalnie usunąć płytki nazębnej.

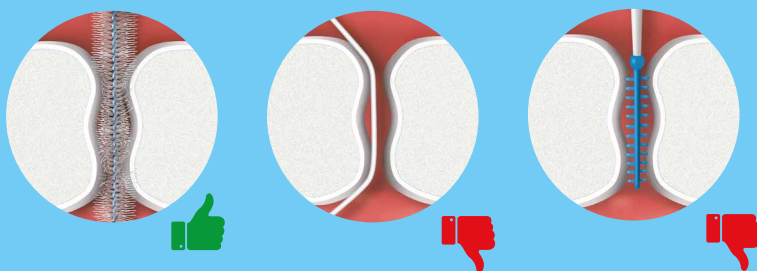

Oprócz usuwania płytki nazębnej umożliwia masaż dziąseł.

Nieużywanie szczoteczek międzyzębowych powoduje powstawanie płytki bakteryjnej, co prowadzi do krwawienia i zapalenia dziąseł, próchnicy i nieświeżego oddechu.

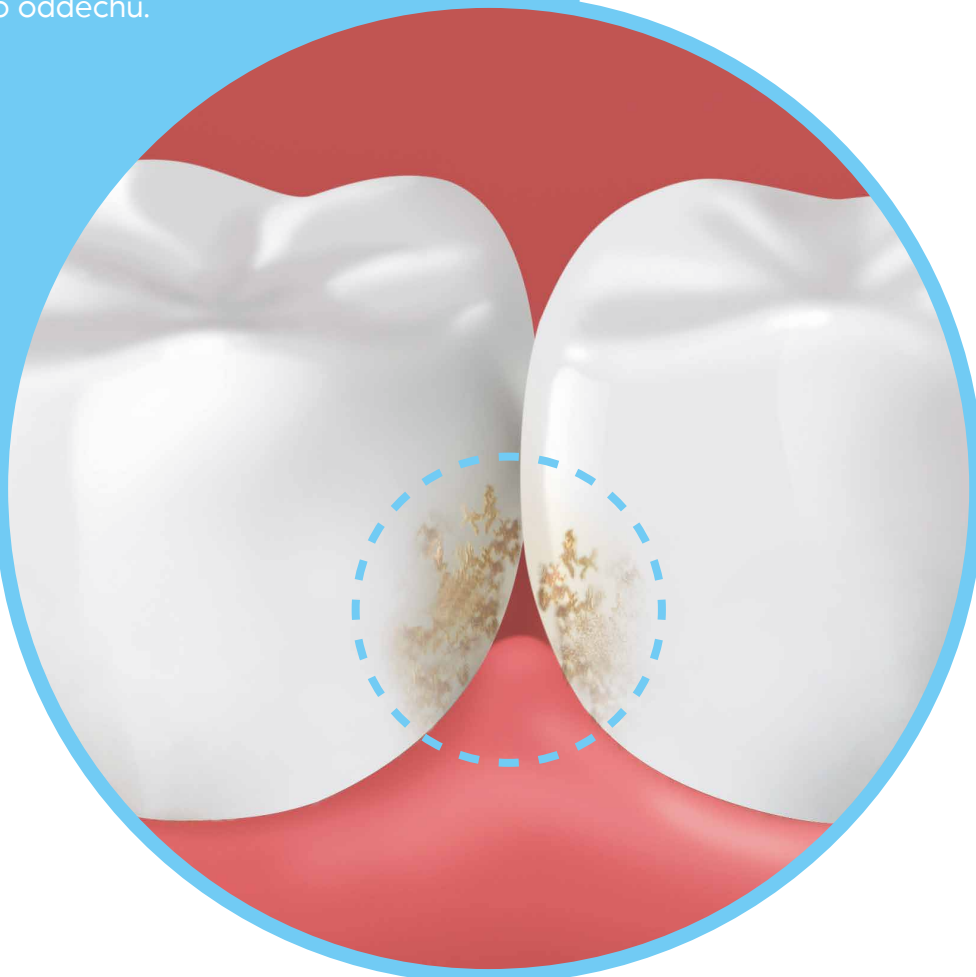


Liczy się budowa

Szczoteczka międzyzębowa składa się z:

- Metalowego rdzenia, na którym znajduje się włosie o długości, grubości i gęstości innej dla każdej szczoteczki. Rozmiar rdzenia to podstawowa cecha przy wyborze odpowiedniej szczoteczki międzyzębowej. Musi mieć odpowiednią grubość, aby móc dotrzeć nawet do najmniejszych przestrzeni i odpowiednią elastyczność, aby usunąć płytkę nazębną bez zginania.
- Korpus szczoteczki międzyzębowej jest w kształcie ułatwiającym uchwyt i kontrolę ruchu.

Wysoka jakość szczoteczki międzyzębowej wynika z zastosowanych materiałów, stabilności oraz metalowego rdzenia i kształtu, które mają zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania.

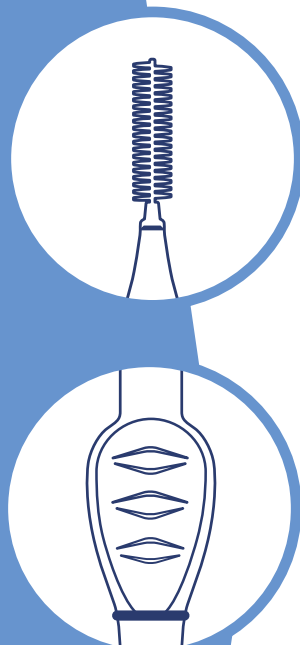


Dla każdej przestrzeni odpowiedni rozmiar

Szczoteczka międzyzębowa jest narzędziem usuwającym płytkę bakteryjną z różnych przestrzeni, które działa poprzez wsuwanie się/ wprowadzenie jej w przestrzeń. Z tego powodu istnieją szczoteczki międzyzębowe o różnych średnicach, aby zaoferować jeden lub więcej rozmiarów mogących dotrzeć do różnych przestrzeni bez powodowania uszkodzeń dziąsła.

Rozmiary szczoteczek międzyzębowych odnoszą się do norm ISO, które różnicują przestrzenie międzyzębowe według średnicy. Średnica szczoteczki międzyzębowej (a zatem jej dostosowanie do kategorii ISO) jest określona przez średnicę metalowego rdzenia plus umieszczone na niej włosie.

Rozmiar szczoteczki międzyzębowej jest uważany za prawidłowy, gdy włosie całkowicie wypełnia przestrzeń międzyzębową, a narzędzie wchodzi w przestrzeń bez oporu, z delikatnym naciskiem.

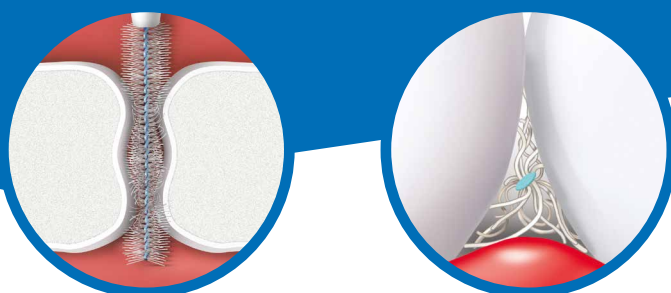

Nici dentystyczne

Nici dentystyczne to jedyne narzędzie zdolne do czyszczenia obszarów punktu kontaktowego między zębami.



Pozwala również na dotarcie do obszaru poniżej brzegu dziąsła i jest w końcu jedynym narzędziem, które może czyścić przestrzeń międzyzębową w przypadku bardzo małych przestrzeni ze względu na bliskość lub niewłaściwe położenie zębów.




Istnieją różne rodzaje nici różniące się materiałem, formatem i powłoką, **jednak najważniejszą różnicą jest to, że nici mogą być zwykłe lub woskowane.**

Nici woskowane są pokryte warstwą wosku, która ułatwia przejście nawet między największymi punktami kontaktowymi.

Prawidłowe stosowanie nici dentystycznych w synergii z innymi przyborami mechanicznej higieny jamy ustnej gwarantuje pełniejsze usunięcie płytki nazębnej.

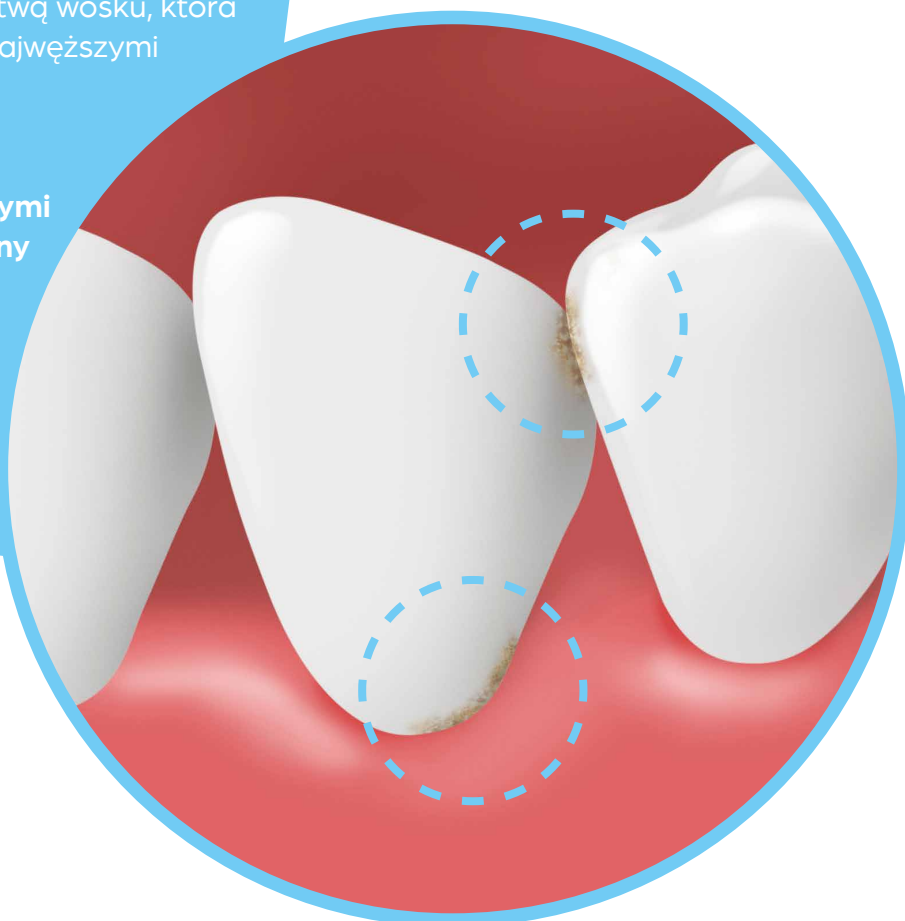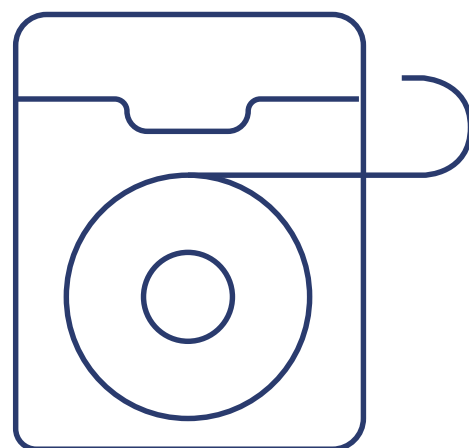



Wykałaczka

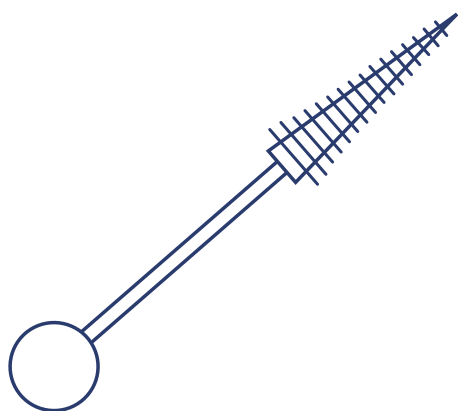

Wykałaczka dociera do przestrzeni między jednym zębem a drugim, gdzie nie dociera szczoteczka i usuwa resztki jedzenia, które gromadzą się między podstawą dziąsła a punktami kontaktu między zębami.

Posiada stożkowy kształt i ma kilka rozmiarów: mała – średnia – duża.

Z tego powodu udaje jej się usunąć pozostałości, które są osadzone w przestrzeni międzyczębowej, **ale nie przylegając idealnie do powierzchni, jej możliwości usuwania płytki nazębnej są ograniczone.**

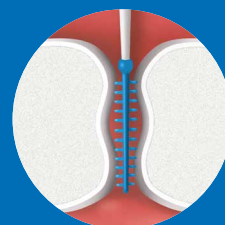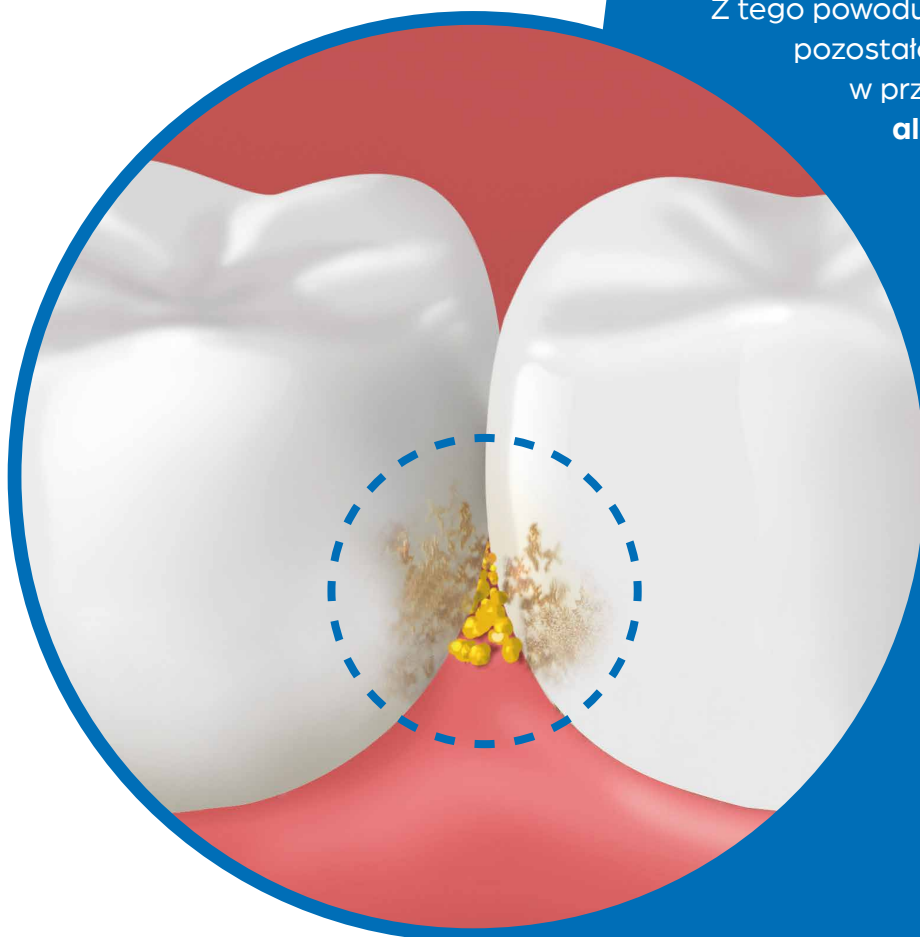

Praktyczna do użytku poza domem.




**Nauka & Doświadczenie to cenne połączenie,
które charakteryzuje produkty Curasept
do mechanicznej higieny jamy ustnej.
Produkty, które gwarantują najwyższy poziom
skuteczności, niezawodności i trwałości.**

Dzięki badaniom i stałej współpracy z dentystami,
higienistami i farmaceutami, uzyskane wyniki
są zawsze na najwyższym poziomie zarówno
pod względem funkcjonalności technicznej,
jak i łatwości użytkowania.

**W tym katalogu przedstawiamy najlepsze
osiągnięcia technologiczne Curasept
dla idealnej higieny jamy ustnej,
odpowiadające w sposób optymalny
na indywidualne potrzeby każdej jamy ustnej.**

SZCZOTECZKI CURASEPT SOFT

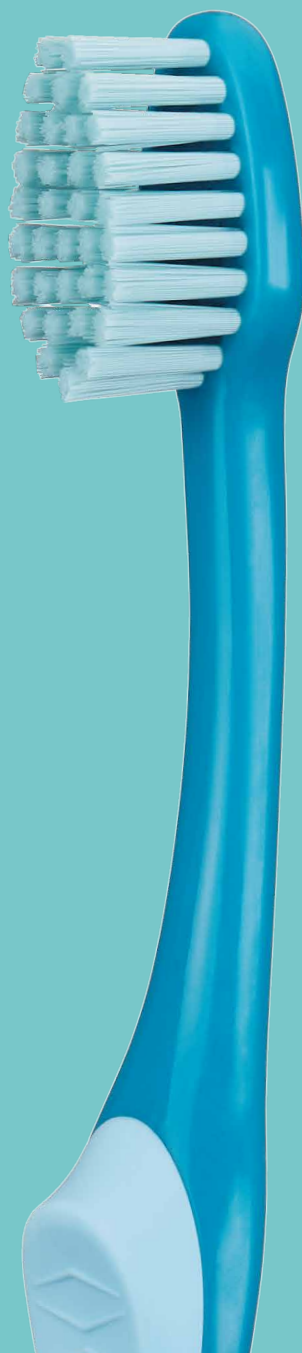

CURASEPT[®]

SOFT

Dzięki technologii Soft Touch System szczoteczki CURASEPT SOFT bardziej skutecznie usuwają i niszczą płytkę nazębną niż tradycyjne szczoteczki do zębów.


SOFT TOUCH SYSTEM

Innowacyjny system charakteryzuje się tysiącami wyjątkowo miękkich, cienkich, elastycznych i gęstych włókien.




WYSOKA JAKOŚĆ WŁÓKNA POLIESTROWEGO W POŁĄCZENIU ZE STOPNIEM MIĘKKOŚCI I GĘSTOŚCI ZAPEWNIĄJĄ NAJWYŻSZĄ SKUTECZNOŚĆ CZYSZCZENIA, NIE USZKADZAJĄC PRZY TYM DZIASEŁ ANI TKANEK PRZYŻĘBIA.

MAKSYMALNA EFEKTYWNOŚĆ MAKSYMALNA ATRAUMATYCZNOŚĆ

Linia szczoteczek do zębów CURASEPT SOFT została zaprojektowana, aby zapobiegać uszkodzeniom dziąseł spowodowanym nieprawidłowym szczotkowaniem. Dzięki zastosowaniu miękkiego i elastycznego włosa, zapewnia niezrównaną delikatność i doskonałą czystość.

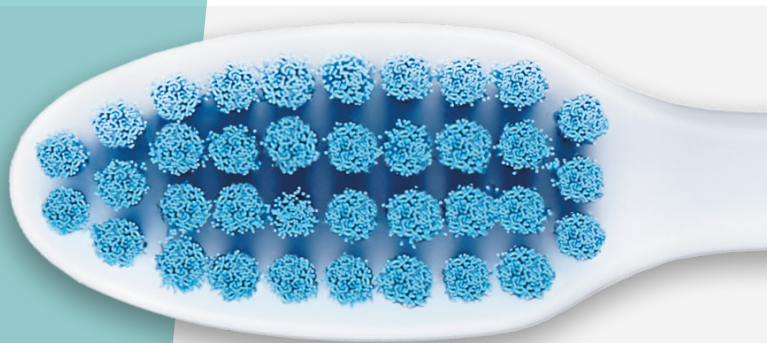

Różne stopnie miękkości, aby móc wybrać najbardziej odpowiedni dla potrzeb pacjenta.

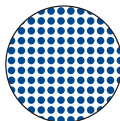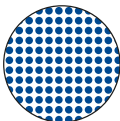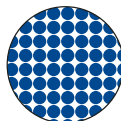Medical	Maxi Soft 010	Extra Soft 012	Soft 015	Medium 017
Główka większa	Główka mniejsza			
Ilość włókien w pęczku				
~ 150	~ 150	~ 110	~ 80	~ 50
				
Średnica włókien				
Ø 0.10	Ø 0.10	Ø 0.12	Ø 0.15	Ø 0.17

Im mniejsza jest średnica włosa, tym większy jest stopień miękkości.

Szczoteczki Curasept Soft

GŁÓWKA MAŁA



GŁÓWKA MAŁA I RÓWNA

Która pozwala na dostęp do każdego pojedynczego zęba i do każdego miejsca jamy ustnej.




MAXI SOFT 010

Ponad 5.000 włókien

NADZWYCZAJ MIĘKKICH Ø 0.10

Idealna dla pacjentów o delikatnych dziąsłach.

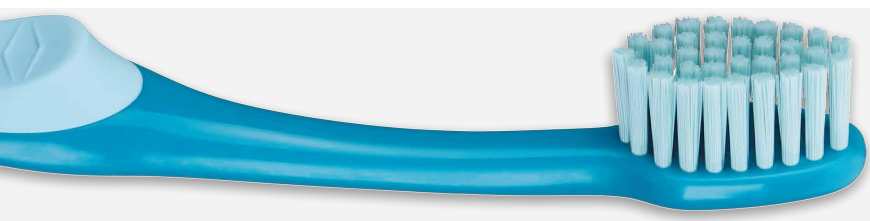


EXTRA SOFT 012

Ponad 3.700 włókien

BARDZO MIĘKKICH Ø 0.12

Idealna dla pacjentów, którzy mają tendencję do wywierania nadmiernego nacisku podczas szczotkowania, ryzykując uszkodzenia dziąseł.

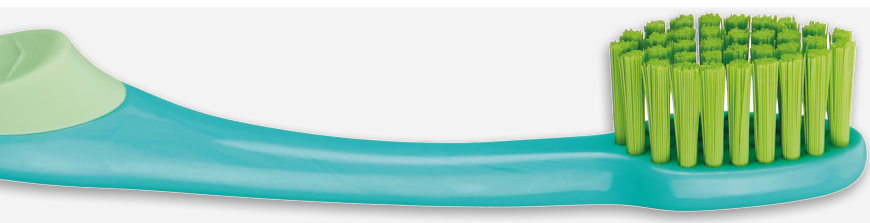


SOFT 015

Ponad 2.700 włókien

MIĘKKICH Ø 0.15

Idealna dla pacjentów bez szczególnych problemów dziąseł.

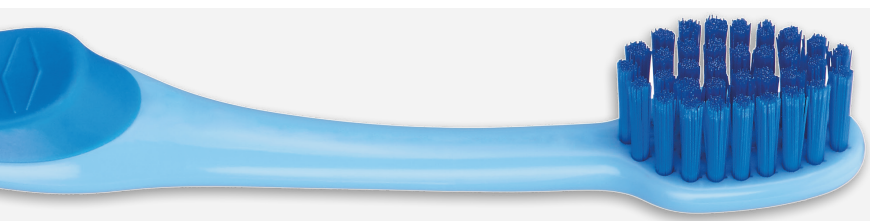


MEDIUM 017

Ponad 1.700 włókien

ŚREDNIEJ TWARDOŚCI Ø 0.17

Idealna dla pacjentów z dobrą kontrolą techniki szczotkowania, ze zdrowym przyzębiem.

GŁÓWKA WIĘKSZA

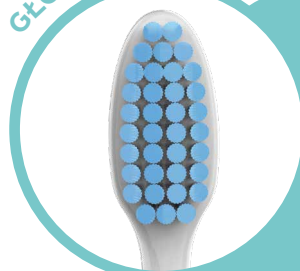

GŁÓWKA WIĘKSZA

rozkłada obciążenie szczotkowania na większej powierzchni niż szczoteczka do zębów o mniejszej główce. W ten sposób siła nacisku rozprasza się zapewniając jeszcze delikatniejsze, ale skuteczne i dokładne czyszczenie.

Szczoteczki Curasept Soft MEDICAL

Ponad 5.000 włókien NADZWYCZAJ MIĘKKICH Ø 0.10

Idealna dla pacjentów będących w trakcie leczenia stomatologicznego i wskazane w połączeniu z kuracją **Curasept Ads z chlorheksydyną**.



Szczoteczki Curasept Soft

GWARANTOWANE BEZPIECZEŃSTWO

Główka jest zaokrąglona
by uniknąć urazu dziąseł.



RUCH KORYGUJĄCY

Elastyczna rączka zaprojektowana
specjalnie w celu złagodzenia
ewentualnego nadmiernego
nacisku.



KSZTAŁT SKUTECZNOŚCI

Anatomiczny kształt
główki, węższy z przodu,
pozwala szczoteczce
na łatwe dotarcie do
mniej dostępnych części
jamy ustnej i doskonałe
czyszczenie odcinka
bocznego.





WIĘKSZA KONTROLA

Gumowa wkładka z przodu pomaga odpowiednio ustawić szczoteczkę i ułatwia kontrolę ruchów.



IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Każda szczoteczka ma grawer laserowy, który wskazuje model i opis.



WYSOKA ERGONOMIA

Profilowana gumowa część obecna również z tyłu szczoteczki pozwala na lepszy uchwyt rączki.

SZCZOTECZKI CURASEPT SPECIALIST



CURASEPT® SPECIALIST

Szczoteczki do zębów Curasept Specialist zostały zaprojektowane, jako precyzyjne narzędzia do perfekcyjnego czyszczenia w określonych sytuacjach i problemach.

Mono Tuft Short - Long

Szczoteczki jednopęczkowe Mono Tuft SHORT i LONG **różnią się długością włosa.**

Obydwie mają pojedynczy okrągły pęczek o stożkowym kształcie, składający się z miękkich i elastycznych włókien.

Pochylenie główki, ergonomiczny uchwyt i delikatność włosa sprawiają, że jest to idealne narzędzie w specyficznych sytuacjach, takich jak:

- higiena jamy ustnej w obecności implantów, mostów i aparatów ortodontycznych
- higiena powierzchni trudno dostępnych
- oczyszczanie bruzdy dziąsłowej
- czyszczenie pojedynczych zębów



Wyrób medyczny CE

Szczoteczki do zębów jednopęczkowe są szczególnie przydatne przy aplikacji żeli Curasept.



Implant

Szczoteczka **IMPLANT** dzięki swojemu kształtowi, ergonomicznemu uchwytowi oraz miękkiemu i elastycznemu włosiu jest idealnym narzędziem do **HIGIENY IMPLANTÓW**.

Wysoka jakość materiałów nie uszkadza powierzchni protetycznych i implantów.



Ortho


Stworzona, by umożliwiać idealną higienę jamy ustnej dla osób noszących **APARATY ORTODONTYCZNE**.

Włosie pokryte jest miękkimi cząstkami, które sprawiają, że powierzchnia jest nieregularna, co pomaga w skutecznym oczyszczeniu bez uszkodzenia szkliwa. Wycięcie włosia w **PROFIL W KSZTAŁCIE „V”** zostało zaprojektowane w celu optymalizacji czyszczenia.

Rzędy środkowe są krótsze:

CZYSZCZĄ ZAMKI, PIERŚCIEŃ, ŁUKI.

Dłuższe rzędy zewnętrzne czyszczą powierzchnię zębów.

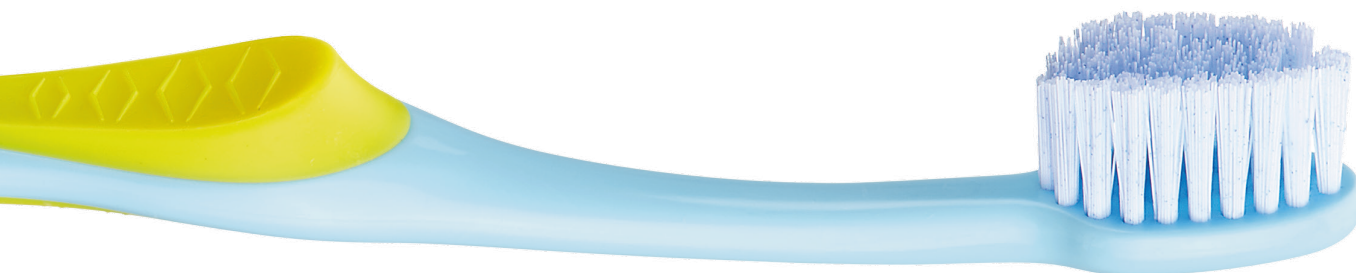

Szczoteczka Ortho dostępna jest w 3 żywych kolorach.




SZCZOTECZKI
MIEDZYZEBOWE
CURASEPT
PROXI


CURASEPT[®]

PROXI

Szczoteczka międzyzębowa jest **NAJLEPSZYM** narzędziem do czyszczenia przestrzeni i powierzchni międzyzębowych, gdzie tradycyjna szczoteczka do zębów, nici i wykałaczka nie są w stanie optymalnie usunąć płytki nazębnej.

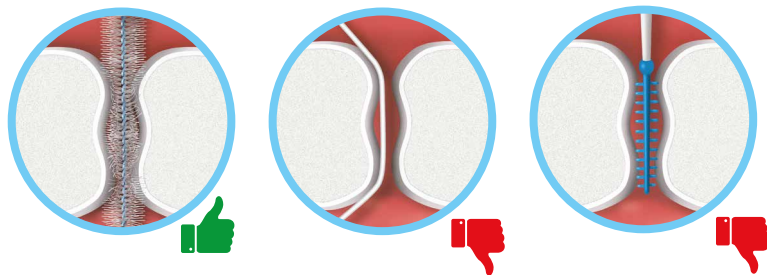

Szczoteczka międzyzębowa usuwając płytkę nazębną, pomaga zmniejszyć krwawienie z dziąseł i nieświeży oddech. Jest również idealna do implantów, stałych protez i aparatów ortodontycznych.

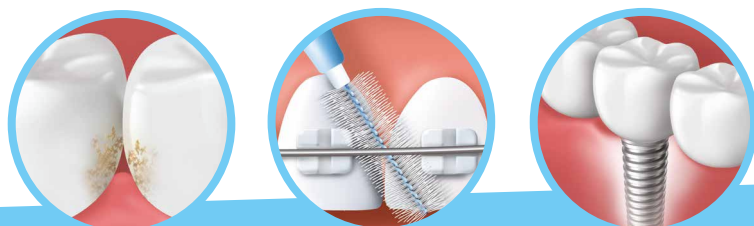

CURASEPT PROXI, to innowacyjna linia szczoteczek międzyzębowych charakteryzująca się wysoką jakością i bezpieczeństwem użycia.

Wszystkie produkty produkowane są wyłącznie we Włoszech przez wiodącą firmę w tym sektorze.

Najwyższa jakość CURASEPT Proxi gwarantowana jest normami ISO, określającymi wymogi i metody badań dla kryteriów wydajności opisywanych przez odpowiednie ISO Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (UNI EN ISO 16409:16).

Szczoteczki międzyzębowe Curasept Proxi zostały poddane **licznym testom laboratoryjnym**, które potwierdziły wytrzymałość na wielokrotne zginanie i rozciąganie **znacznie powyżej wartości wymaganych przez normę ISO.**



Szczegóły robią różnicę




SAFE STOP SYSTEM

to innowacyjna i ekskluzywna **osłona ochronna**, umieszczona pomiędzy uchwytem a włosiem, która **zapobiega ewentualnym urazom** dziąseł, zapewnia **większą stabilność** metalowego rdzenia i **usprawnia kontrolę** szczoteczki międzyzębowej podczas użytkowania.



DELIKATNOŚĆ

Niezwykłe elastyczne włosie z poliamidu nylonowego 612.

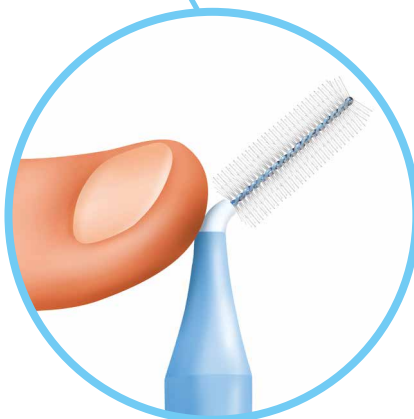

SKUTECZNOŚĆ

Ultracienki rdzeń metalowy, odporny, elastyczny i atraumatyczny.

ROZPOZNAWALNOŚĆ

Rozmiar szczoteczki międzyzębowej umieszczony jest na ręczce.



BEZPIECZEŃSTWO

Wewnętrzny system blokady rdzenia metalowego, zapewniający całkowite bezpieczeństwo i stabilność.



ERGONOMIA

Ergonomiczna rączka dla lepszego uchwytu i większego komfortu użytkowania.



PRAKTYCZNOŚĆ

Ośłona ochronna może również służyć jako przedłużenie rączki.



Szczoteczki międzyzębowe Curasept Proxi

ZAPOBIEGANIE

Wskazane do wąskich przestrzeni międzyzębowych dla zdrowych dziąseł.



P06	P07	P08	P09	P11
ISO 0	ISO 1	ISO 1	ISO 2	ISO 3
0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,1 mm

ZAPOBIEGANIE MIX

Opakowanie zawiera 5 różnych rozmiarów linii Prevention, aby znaleźć ten odpowiedni dla różnych przestrzeni międzyzębowych.





LECZENIE

Wskazane do większych przestrzeni międzyzębowych z wypełnieniami, mostami, koronami, problemami z dziąsłami, nieprawidłowym położeniem zębów lub po zabiegach stomatologicznych.



T10	T12	T14	T17	T17 CONE	T20 SOFT	T21	T27	T33
ISO 2	ISO 3	ISO 4	ISO 5	ISO 5 CONE	ISO 6 SOFT	ISO 6	ISO 7	ISO 8



NICI CURASEPT FLOSS

CURASEPT FLOSS

Nić dentystyczną należy stosować jako dodatek do szczoteczki i szczoteczki międzyzębowej, aby usunąć bakteryjną płytkę nazębną z punktów kontaktowych i bruzdy dziąsłowej, a także z wąskich przestrzeni międzyzębowych, do których nie dociera nawet najmniejsza szczoteczka międzyzębowa.

Gama **CURASEPT FLOSS** składa się z 6 rodzajów nici nasączonych chlorheksydyną w celu dodatkowego zwalczania płytki nazębnej.



Nici Curasept Floss



MICROFIBRA EXPANDING

W trakcie użytkowania nić rozszerza się, idealnie dopasowując do przestrzeni międzyzębowych. Większa objętość nici wynikająca z rozszerzania się włókien pozwala na lepszą higienę przy zachowaniu delikatności dla dziąseł.



PTFE

Wykonane z materiału o wysokiej wytrzymałości, który nie strzępi się i zapewnia doskonałą gładkość. Ze względu na szczególne działanie czyszczące nadają się do zmniejszonych przestrzeni międzyzębowych i dla osób używających nici dentystycznych po raz pierwszy.



PRZEKRÓJ PŁASKI Z PTFE

Nie strzępią się i gwarantują doskonałą gładkość. Płaski przekrój ułatwia prześlizgiwanie się w zmniejszone przestrzenie międzyzębowe.



CZARNE WOSKOWANE

Płaskie z poliestru pokryte są specjalnym mikrokryształicznym woskiem, który zwiększa gładkość i odporność, ułatwiając ruch w przestrzeni międzyzębowej.

Czarny kolor doskonale uwidacznia usuniętą płytkę nazębną i pozostałości, pozwalając na lepszą kontrolę.



KLASYCZNE WOSKOWANE

Są pokryte specjalnym mikrokryształicznym woskiem, który zwiększa gładkość i odporność, zapewniając skuteczne działanie czyszczące dzięki łatwości wślizgiwania się w przestrzeń międzyzębową.



ULTRACIENKIE NIE WOSKOWANE

Składają się z ponad stu zwartych mikrowłókien, które zapewniają większą wytrzymałość, elastyczność i skuteczne działanie czyszczące w przestrzeniach międzyzębowych.

Stojaki reklamowe

OBROTOWY



STOJAK PODSTAWOWY

Podstawka pod szczoteczki klasyczne



PROXI

Podstawka pod szczoteczki międzyzębowe



Materiały do gabinetu




ZESTAW PROFESSIONAL

Niezbędne narzędzie do gabinetu, gdzie można przechowywać szczoteczki międzyzębowe do testowania z pacjentami. Zestaw składa się z 12 przegródek, w których można umieścić produkty według własnych potrzeb. Jeśli ma się zamiar przechowywać go w szufladzie, pokrywkę można zdjąć.

KARTA PRZEPISANIA

Zestaw zawiera karty, które należy przekazać pacjentowi z prawidłowo dobranym rozmiarem szczoteczki międzyzębowej.

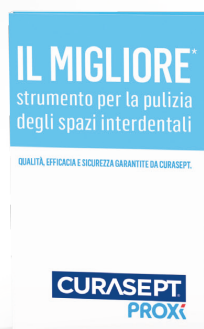

OPAKOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Szczoteczki międzyzębowe można zamawiać w praktycznych opakowaniach po 25 sztuk.

ZESTAW ŻELI

Zestaw zawiera 50 próbek żelu Curasept ADS 0,5% CHX.





Dystrybutor w Polsce:

INDENT

ul. Paprotna 14

51-117 Wrocław

T: 71 342 34 19

poczta@indent.pl

<http://indent.pl>

Sklepy online:

hurtowy: sklep.indent.pl

detaliczny: dbamozebry.com

Dział Obsługi Klienta

T: 71 342 33 29

E: info@indent.pl

Dział Marketingu

T: 71 342 33 47

E: biuro@indent.pl



DbamyOZeby
CuraseptPolska



curasept_polska

INDENT
PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA PREMIUM